

価格表

※価格は全て税抜価格です。

Mupid-2plus ¥45,000 M-2P

セット内容：Mupid-2plusパワーサプライ(1)
Mupid-2plus泳動槽カバー(1)
Mupid-2plus泳動槽(1)
ゲルメーカーセット-L(1)



単品		
Mupid-2plusパワーサプライ(1)	¥ 20,420	MP-2P
Mupid-2plus泳動槽/蓋付(1)	¥ 24,080	OE-2P
Mupid-2plus泳動槽カバー(1)	¥ 4,200	C-2P
ゲルメーカーセット-L(1)	¥ 9,200	GM-L
ゲルトレイ-L(2)	¥ 2,920	GT-L
ゲルトレイ-S(4)	¥ 3,440	GT-S
コーム-L(2)	¥ 4,400	C-L
コーム-25(2)	¥ 5,660	C-25
ゲルメーカースタンド-L(1)	¥ 5,540	GS-L
ゲルメーカーセット-HR(1)	¥ 13,840	GM-HR
ゲルトレイ-L-HR(2)	¥ 4,700	GT-LH
ゲルトレイ-S-HR(4)	¥ 5,240	GT-SH
コーム-L-HR(2)	¥ 5,240	C-LH
ゲルメーカースタンド-HR(1)	¥ 6,300	GS-LH

※価格は全て税抜価格です。

Mupid-2X ¥28,000 M-2X

セット内容：Mupid-2Xパワーサプライ(1)
Mupid-2X泳動槽カバー(1)
Mupid-2X泳動槽(1)



※Mupid-2Xは下取り品が必要です。
※Mupid-2Xには、ゲルメーカーセットが含まれません。

※価格は全て税抜価格です。

Mupid-exU ¥65,000 EXU-1

セット内容：Mupid-exUパワーサプライ(1)
Mupid-exU泳動槽カバー(1)
Mupid-exU泳動槽(1)
Mupid-exU用ゲルメーカーセット(1)
電源コード(1)



単品		
Mupid-exUパワーサプライ(1)	¥ 49,000	EXU-P
Mupid-exU泳動槽/蓋付(1)	¥ 19,000	X-A
Mupid-exU蓋(1)	¥ 4,200	EXU-B
電源コード(1)	¥ 1,100	MCD3
Mupid-exU用ゲルメーカーセット(1)	¥ 6,800	X-MS
Mupid-exU用ゲルトレイ大(2)	¥ 2,200	X-GL
Mupid-exU用ゲルトレイ小(4)	¥ 2,200	X-GS
Mupid-exU用ゲルメーカースタンド(1)	¥ 2,860	X-SD
Mupid-exU用スタンダードコーム(2)	¥ 1,540	X-C1

※価格は全て税抜価格です。

Mupid-One ¥71,000 O1-01

セット内容：Mupid-Oneパワーサプライ(1)
Mupid-One蓋(1)
Mupid-One泳動槽(1)
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(1)
電源コード(1)



単品		
Mupid-Oneパワーサプライ(1)	¥ 49,000	O1-P
Mupid-One泳動槽/蓋付(1)	¥ 19,800	O1-CE
Mupid-One蓋(1)	¥ 4,200	O1-B
電源コード(1)	¥ 1,100	MCD3
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(1)	¥ 11,520	AC-MS
EXU/ONEゲルトレイ-L-HR(2)	¥ 4,700	AC-GL
EXU/ONEゲルトレイ-S-HR(4)	¥ 5,240	AC-GS
EXU/ONEゲルメーカー台-HR(1)	¥ 5,040	AC-SD
EXU/ONEコーム-HR(2)	¥ 3,560	AC-C1

※注 UVトランスイルミネーターご使用時には、安全のためUVカットフェイスシールドを必ず着用してください。
○商品は、改良等のため予告なく変更する場合があります。○「Mupid」は株式会社アドバンスの登録商標です。



安全に関するご注意

商品を安全にお使い頂くため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

総販売元 〒103-0004 東京都中央区東日本橋一丁目4番6号
株式会社 **ミュージッド** 東日本橋一丁目ビル8F
電話：03-5839-2533 FAX：03-3862-1285

製造元
株式会社 **アドバンス**

Mupid®

電気泳動装置 ミューピッド

総合カタログ



Mupid® 電気泳動装置

Mupid-2plus



サブマリン型のスタンダードモデルとして圧倒的な実績と信頼性を誇るMupid-2の性能を継承し、使いやすさと安全面がさらに向上。



税抜価格

¥45,000

- Mupidスタンダードモデルの後継機
- 洗練された機能的デザイン

Mupid-exU



タイマー機能、マルチピペット対応、UV透過泳動槽という特徴をもつMupid-exに3種類の出力電圧を追加し(計7種類)電源の動作安定性を向上させた多機能モデル。



税抜価格

¥65,000

- マルチピペット&多検体対応
- UV透過泳動槽
- タイマー内蔵
- 出力電圧バリエーション7種類

Mupid-One



タイマー機能、マルチピペット対応、7種出力電圧切替などexUの主な機能を有し、さらに耐熱ゲルメーカーセットを標準で付属し、かつCEマーキングに準拠したMupidの最上位機種。



税抜価格

¥71,000

- ヨーロッパ電気安全規格CEに準拠
- 耐熱ゲルメーカーセット標準付属
- 泳動槽に難燃性プラスチックを採用
- タイマー、マルチピペット対応など

Mupid-2X

下取買換専用

Mupid-2plusと同じ性能の下取買換専用機種。当社製品の泳動槽と交換で特別価格でお買換えいただけます。ゲルメーカーセットは含まれておりません。



税抜価格

下取買換特別価格
¥28,000

下取対象

Mupid-2 i-Mupid-j
Mupid-21 その他
Mupid-a

マーク一覧



タイマー機能。Mupid-exU/Mupid-Oneでは1~99分までの設定、連続通電の設定も可能。



電源を分離でき、泳動槽が丸洗いできる。



マルチチャンネルピペット対応。多検体泳動を手早く行うのに適している。



紫外光透過性の泳動槽。中波長(300~320nm)の紫外光でバンドを泳動槽ごと観察するのに適している。(先染の場合)



泳動槽のカバーを外すと自動的に通電が切断される安全機構付。





入力電圧がAC100~240Vとなっており、海外でも使用可能。(各国に対応した電源コードが別途必要です。)



耐熱ゲルメーカーセットが付属しています。沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレイに注入することができ、ゲル作成時間の短縮につながります。

コーム25 ※オプション

- 17検体(標準コーム)を、25検体に増やせます。
- マルチピペット対応ゲル。分取用としても利用できます。

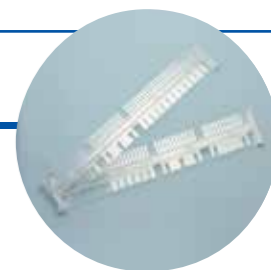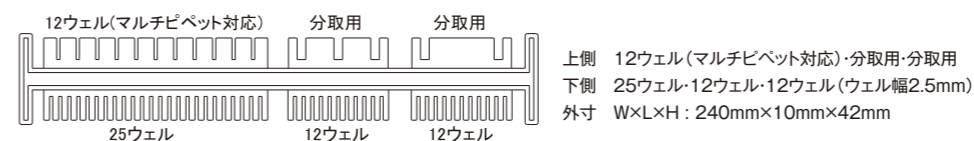

製品仕様

	Mupid-2plus Mupid-2X	Mupid-exU	Mupid-One
出力電圧	DC50V,100V	DC135V,100V,75V,50V,25V,35V,18V	
入力電圧	AC100~110V	AC100~240V, AC50/60Hz	
タイマー設定	-	0~99分の設定及び連続通電可能(一時停止可能)	
安全スイッチ	マイクロスイッチ(蓋がない時電圧出力停止)	マイクロスイッチ(蓋がない時電圧出力停止)	
メモリー機能	-	前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶	
緩衝液容量	約250~280ml	約300~350ml	
多検体対応	-	MAX96検体 13ウェル使用時:9mmピッチ 26ウェル使用時:4.5mmピッチ	
外形寸法(電源・槽合体時)	187(W)×140(D)×57(H)mm	260(W)×170(D)×62(H)mm	259(W)×169(D)×64(H) mm
重量(電源・槽合体時)	450g	750g	838g

アクセサリ

名称	ゲルメーカーセット-L(型番:GM-L)	ゲルメーカーセット-HR(型番:GM-HR)	Mupid-exUゲルメーカーセット(型番:X-MS)	ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(型番:AC-MS)
外観形状				
セット内容(数量)	コーム-L(2) ゲルメーカースタンド-L(1) ゲルトレイ-L(2) ゲルトレイ-S(4)	コーム-L-HR(2) ゲルメーカースタンド-HR(1) ゲルトレイ-L-HR(2) ゲルトレイ-S-HR(4)	Mupid-exUスタンダードコーム(4) Mupid-exUゲルメーカースタンド(1) Mupid-exUゲルトレイL(1) Mupid-exUゲルトレイS(2)	EXU/ONEコーム-HR(4) EXU/ONEゲルメーカー台-HR(1) EXU/ONEゲルトレイL-HR(1) EXU/ONEゲルトレイS-HR(2)
ウェル数(各ウェル幅)	上6・6・12(各6mm) 下8・8・17(各4mm)	上6・6・12(各6mm) 下8・8・17(各4mm)	上13(各6mm) 下26(各2mm)	上13(各6mm) 下26(各2mm)
ゲルサイズ(トレイ外寸)	大110×60 mm 小 55×60 mm	大110×60 mm 小 55×60 mm	大130×122 mm 小130× 60 mm	大130×122 mm 小130× 60 mm

オプション オプション以外のアクセサリは標準装備になります。

アクセサリ対応表

	Mupid-2plus	Mupid-2X	Mupid-exU	Mupid-One
ゲルメーカーセット-L(型番:GM-L)	○	○	○	○
ゲルメーカーセット-HR(型番:GM-HR)	○	○	○	○
Mupid-exUゲルメーカーセット(型番:X-MS)	×	×	○	○
ゲルメーカーセットEXU/ONE-HR(型番:AC-MS)	×	×	○	○

対応表の見方 ○:泳動槽にセットできます。 ×:泳動槽にセットできません。